

Aurum Xtra
s manukovým medem



Představujeme
splachovatelný
sáček **Aurum® Xtra**



Zlepšovatelé v péči o stomie



Kombinace dvou revolučních novinek v jednom unikátním splachovatelném sáčku.

Sáček je vyvinutý speciálně pro zvýšení kvality života kolostomiků. Splachovatelný sáček Aurum[®] Xtra je nepostradatelným řešením pro život každého kolostomika, který řeší problém s likvidací použitého sáčku.

Vnitřní vložka sáčku Aurum[®] Xtra může být spláchnuta v jakémkoliv toaletním systému, do kterého je možné splachovat toaletní papír. Nositeli dává pocit běžných toaletních zkušeností a osvobození, které předtím nemohl mít.

Pro stomiky, kteří mají namáhanou nebo citlivou kůži, je nově vyvinut sáček Aurum[®] Xtra. Sáček obsahuje manukový med, který je přidán do šetrného nazatežujícího hydrokoloidu, což výrazně podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.

Výhody Aurum[®] Xtra..

Šetrný k pokožce

Do hydrokoloidní podložky Hyperflex[®] je přidán manukový med, který podporuje hojení kůže v okolí stomie.

Manukový med

Manukový med pomáhá ničit bakterie, potlačit zánět a stimulovat růst buněk.

Svoboda

Nikdy nebudete muset řešit likvidaci použitého sáčku.

Splachovatelný v domácí toaletě.

Úspora času a pohodlné řešení výměny sáčku.

Splachovací vložka

Vnitřní vložka i podložka mohou být jednoduše spláchnuty.

Biologicky se rozloží v každém odpadním systému.



Vlastnosti a výhody

- Hyperflexní® hydrokoloid s manukovým medem je šetrný k pokožce a může pomoci snížit podráždění pokožky.
- Snímatelná podložka - uživatelé se mohou rozhodnout, zda oddělit vnitřní vložku i podložku. Tento výběr nabízí větší svobodu při vyhazování sáčků.
- Nový Dual-Carb®2 filtr - laserem řezaný filtr pro optimální přesnost s cílem zabránit nafukování sáčku, ucpávání a lepší pohlcení zápachu.
- Easy2peel™ úchytka - napomáhá k bezproblémovému odstranění podložky a tím snižuje poranění kůže.
- Super měkký voděodolný potah sáčku - výjimečný komfort během nošení.
- Manuál pro vystřížení podložky - podložka s naznačenými otvory umožňuje dokonalé vystřížení přesného otvoru na míru Vaší stomie a tím snižuje možnost úniku stolice a tím i následné podráždění pokožky.

“
Cítím výrazné zlepšení.
Je to rychlejší a čistější.
S Aurum® Xtra se více
cítím být člověkem.”

P.M, Velká Británie

Aurum Xtra
s manukovým medem

Jak používat Aurum[®] Xtra

Likvidace sáčku Aurum[®] Xtra je velmi jednoduchá a rychlá. Postupujte podle následujících kroků.

Krok 1



Vyhodíte vnější obal sáčku do odpadkového koše.

Krok 2



Vnitřní vložku sáčku společně s podložkou spláchněte do toalety.

Nebo odděleně vnitřní vložku a podložku, výběr je na Vás!

Krok 1



Vyhodíte vnější obal sáčku do odpadkového koše.

Krok 2



Spláchněte vnitřní vložku sáčku do toalety.

Krok 3



Vyhodíte podložku do odpadkového koše nebo spláchněte do toalety.

Odpovědi na Vaše dotazy...

“

Snadné spláchnutí... Cítím se více
sebevědomě, když jsem venku. ”

P.B - Hereford, VB

Jaké jsou výhody Manukového medu přidaného do podložky?

Welland Medical Hyperflex® hydrokoloid je vyvinut na základě přírodních ingrediencí. Historická data podporují užití těchto ingrediencí pro aplikaci adheze stomických sáčků na pokožku pacienta. Manukový med je známý především pro své léčivé účinky a může pomoci podpořit zdravou kůži v okolí stomie.

Manukový med je čistý přírodní med vyrobený z nektaru rostliny Manuka, která roste v Novém Zélandu. Po celou dobu je manukový med známý pro své léčivé účinky. Je to jeden z nejstarších známých léků, který byl používán od nepaměti až do dneška. Dlouholetý výzkum ukazuje, že manukový med napomáhá regulovat záněty, regeneruje buňky a má antibakteriální účinky, což může pomoci k lepšímu hojení kůže.

Jak mám vědět, že se sáček rozpustí?

Aurum® Xtra je vyroben ze 3 biologicky rozložitelných částí:

1. Bílá vnitřní část je vyrobena ze směsi jednoduchých polymerů a celulózy, které se rozpustí ve vodě.
2. Vnitřek bílé vnitřní vložky je potažen transparentním filmem, který chrání vnitřní vložku sáčku. Ten je také vyroben z jednoduchých polymerů.
3. Podložka je vyrobena z hydrokoloidu, který se skládá ze směsi přírodních materiálů. Když se ponoří do vody, podložka nasákne vodu, nabobtná a poté se rozpustí do vody.

Biologický rozklad se uskutečňuje hlavně působením bakterií, které se nachází v kanalizačním systému. Jsou to bakterie, které umí rozložit tyto tři části sáčku Aurum® Xtra. Proces trvá stejnou dobu jako při rozkládání běžné stolice.

Jak mám vědět, že se sáček spláchne?

Welland Medical je průkopníkem a neustálým inovátorem splachovatelných sáčků již od roku 1996, kdy byl vytvořen první splachovatelný stomický sáček na světě. Welland Medical Aurum® Xtra a Flair Active® Xtra jsou i nadále jedinými splachovatelnými sáčky na světě. Aurum® Xtra je rozsáhle testován z hlediska splachovatelnosti a jeho následné ekologické odbouratelnosti ve Velké Británii a splňuje mezinárodní standardy stanovené Radou pro výzkum vody. (VB)



Jak je Aurum[®] Xtra biologicky rozložitelný?

Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou splachovatelné v jakémkoliv systému, kde je možné splachovat toaletní papír včetně septiků, extrakčních systémů např. v letadlech, i v mobilních toaletách.

Biologická rozložitelnost v kanalizaci trvá stejně dlouho jako rozklad stolice.

“

Sáček je skvělý!
Cítím se sebejistě.”

C.D, Nizozemsko


“

Tyto splachovací sáčky jsou super...umožňují mi normální život.”

S.F, Velká Británie

1

Jednoduše odloupneme
a spláchneme...

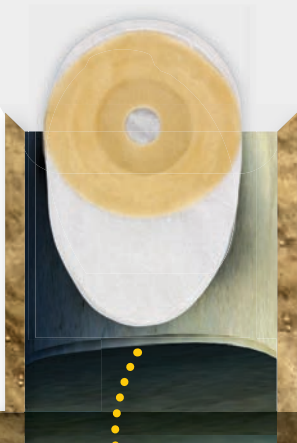


2

Vnitřní vložka
vstoupí do
kanalizace

3

Bakterie ve vodě začnou
rozkládat vnitřní vložku
sáčku a podložku

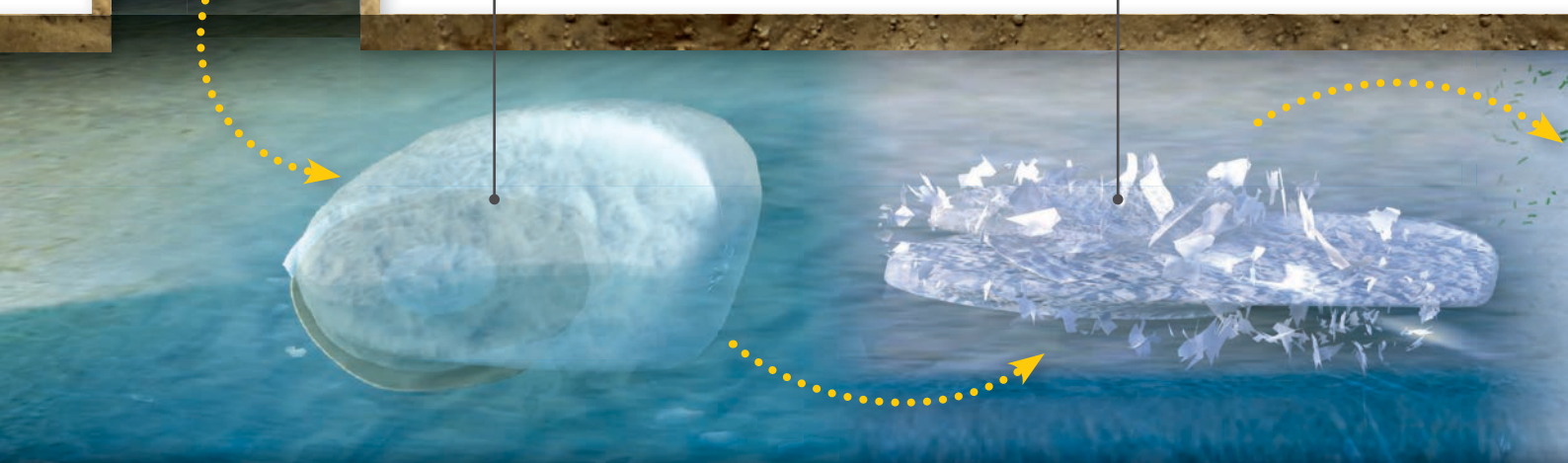

Je šetrný k životnímu prostředí

Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček Aurum[®] Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.

“
Našla jsem velmi snadné
použití, které je zároveň
mnohem lepší pro moji kůži.”

M.C, Velká Británie




4

Stolice uvnitř sáčku
pronikne ven a bakterie
ji rozloží

5

Nakonec je splachovatelný
sáček bakteriemi kompletně
rozložen

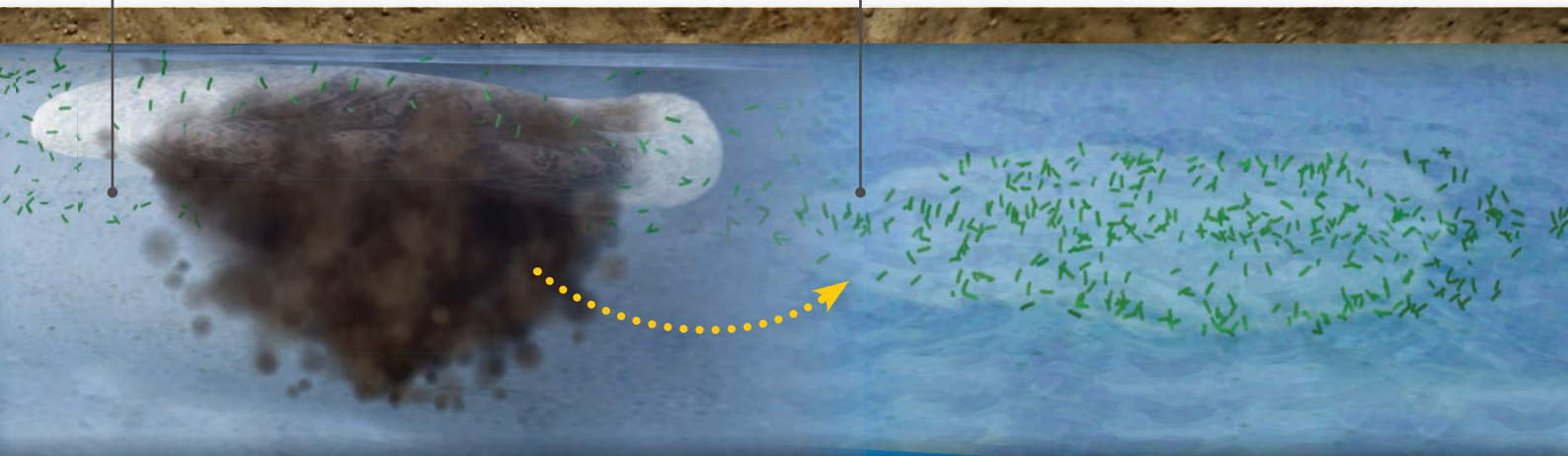



Výrobce - **Welland Medical**

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:

J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel/fax: 371 727 305, **zelená linka: 800 100 644**

e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz

Navštivte stránky **www.ja-zdravotnickepotreby.cz**

Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované a patřící společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

